

ASHBY GRAB RAILS

Article No.
Ashby 30cm: 6257
Ashby 45cm: 6219
Ashby 60cm: 6220

FITTING INSTRUCTIONS

1. Position Grab Rail to a flat surface. Not recommended for outdoor use or areas exposed to direct sunlight.
2. Drill through at least two of the blanked of screw holes in the fixing brackets, both ends of the rail.
3. Mark the wall for positions of screw holes. For a secure fitting it is important the screw hole positions are accurately marked and drilled.
4. Use suitable screws and plugs for the wall (50mm x size 10 with plugs for normal brickwork)
5. After installation check the rail is securely fitted to the wall.
6. Clean with non-scratch detergent.

Maximum user weight 115 kg.

Made in EU
Gordon Ellis & Co.
Derby. GB-DE74 2NP

For other details of Gordon Ellis products for elderly and disabled people, please contact your supplier, or Gordon Ellis direct.

BARRES D'APPUI ASHBY

Article No.
Ashby 30cm: 6257
Ashby 45cm: 6219
Ashby 60cm: 6220

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Placez la barre d'appui selon les besoins. La barre n'est pas recommandée pour un usage extérieur.
2. Percer au moins deux des trous obturés dans les supports de fixation, aux extrémités de la barre.
3. Marquer les positions des trous des vis sur le mur. Pour une fixation solide, il est important que les positions des trous des vis soient marquées et percées avec précision.
4. Se servir de vis et de chevilles appropriées pour le mur (50 mm x taille 10 avec des chevilles pour mur en maçonnerie de briques normales).
5. Après la pose, vérifier que la barre est solidement fixée au mur.
6. Nettoyez avec un détergent non abrasif.

Poids maximum de l'utilisateur
115 kg

Fabriqué dans l'Union Européenne
Gordon Ellis & Co.
Derby. GB-DE74 2NP

Pour des informations sur les autres produits Gordon Ellis pour les personnes âgées et handicapées, veuillez contacter votre fournisseur ou Gordon Ellis directement.

ASHBY HALTEGRIFFE

Artikel-Nr
Ashby 30cm: 6257
Ashby 45cm: 6219
Ashby 60cm: 6220

EINBAUANLEITUNG

1. Griffstange nach Bedarf positionieren. Nicht für die Verwendung im Freien empfohlen.
2. Durch mindestens zwei abgedeckte Löcher in den Befestigungshalterungen – an beiden Enden der Stange – bohren.
3. Die Positionen von Schraubenlöchern an der Wand markieren. Für das sichere Anbringen ist es von Bedeutung, daß die Schraubenlochpositionen präzise angerissen und gebohrt werden.
4. Geeignete Schrauben und Dübel für die Wand benutzen (50 mm x Größe 10 mit Dübeln bei normalem Mauerwerk).
5. Nach dem Einbau kontrollieren, daß die Stange sicher an der Wand befestigt ist.
6. Zur Reinigung nur nicht scheuernde Mittel verwenden.

Höchstgewicht des Benutzers:
115 kg

In der EU hergestellt
Gordon Ellis & Co., Derby
DE74 2NP, GB

Wenn Sie Einzelheiten über andere Produkte von Gordon Ellis für ältere und behinderte Menschen wünschen, fragen Sie bitte Ihren Händler oder setzen Sie sich direkt mit Gordon Ellis in Verbindung.

BARRA DE SEGURIDAD ASHBY

Artículo N°:
Ashby 30cm: 6257
Ashby 45cm: 6219
Ashby 60cm: 6220

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque la Barra de Seguridad en la posición deseada. No se recomienda para su uso en exteriores.
2. Taladre, al menos, dos agujeros obstruidos en las abrazaderas de fijación, a cada extremo de la barra.
3. Marque en la pared la posición de los agujeros para los tornillos. Para conseguir una fijación perfecta es importante marcar y taladrar las posiciones de los agujeros con precisión.
4. Utilice tornillos y tacos de pared apropiados (tamaño del tornillo N° 10 x 50 mm, con tacos de pared normales para ladrillos).
5. Después de la instalación, compruebe que la barra de seguridad esté perfectamente sujeta a la pared.
6. Pulire con deterativo non abrasivo.

Peso máximo del usuari 115 kg

Hecho en la UE
Gordon Ellis / Co. Derby-
GB-DE74 2NP

Si desea detalles de otros productos de Gordon Ellis para ancianos y minusválidos, por favor contacte a su distribuidor, o a Gordon Ellis directamente.

ASTA DI PRESA ASHBY

Artículo No.
Ashby 30cm: 6257
Ashby 45cm: 6219
Ashby 60cm: 6220


ISTRUZIONI PER L'USO

1. Sistemare l'asta di presa nella posizione desiderata. Non è consigliata per l'impiego all'esterno.
2. Perforare almeno due dei fori contrassegnati nelle staffe di fissaggio, su entrambe le estremità dell'asta.
3. Contrassegnare sul muro le posizioni dei fori delle viti. Per un'installazione sicura, è importante che le posizioni dei fori delle viti siano contrassegnate e perforate con precisione.
4. Utilizzare viti e tappi idonei per la parete (50 mm x misura 10 con tappi per muratura normale).
5. Dopo l'installazione, controllare che l'asta sia installata alla parete in modo sicuro.
6. Limpie con detergente non abrasivo.

Peso massimo utente:115kg

Fabbricato nella UE
Gordon Ellis & Co. Derby
GB-DE74 2NP

Per ottenere ulteriori informazioni sui prodotti della Gordon Ellis per gli anziani e invalidi, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore oppure direttamente alla Gordon Ellis.

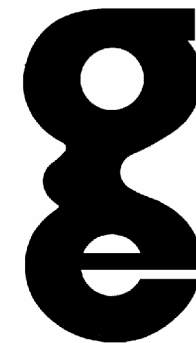

**GORDON
ELLIS
& CO**

**MANUFACTURERS IN
WOOD AND PLASTIC**

ESTABLISHED 1893



Ashby Grab Rails

TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY DE74 2NP
ENGLAND
TEL: (01332) 810504
INT: + 44 1332 810504
FAX: (01332) 850830
INT: + 44 1332 850830
e-mail: gordon.ellis@gordonellis.co.uk
http://www.gordonellis.com

Company registered in England
No. 231734
VAT No. GB 428 4666 26

