

# DERBY SPILL-NOT®

STABILISING JAR  
& BOTTLE OPENER



FR - Un outil conçu pour ceux qui ont des difficultés à saisir ou qui ne peuvent se servir que d'une main pour ouvrir les pots ou les flacons et qui permet d'éviter les déversements. Trois cônes renversés en caoutchouc permettent de tenir n'importe quel récipient, pour des diamètres de 2,5 à 10 cm. Les pieds en caoutchouc empêchent le "ne reversez plus" de - glisser sur les surfaces lisses ; il peut également être fixé en permanence sur le plan de travail.

DE - Ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle, die mit nur einer Hand auskommen müssen oder schwache Hände haben. Das Gerät erleichtert das Öffnen von Flaschen und Gläsern und verhindert gleichzeitig Verschüttung. Drei umgekehrte Gummikegel halten Behälter, von 2,5 bis 10 cm Durchmesser. Gummifüße verhindern, daß der Verschütt-Mein-Nicht auf glatten Oberflächen verrutscht. Er kann auch dauernd an einer Arbeitsfläche befestigt werden.

---

Clean with warm soapy water.  
Nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse.  
Mit warmem Seifenwasser gereinigt.



FROM MEDICINE  
CONTAINERS  
TO 2 LITRE  
BOTTLES


SUITABLE FOR  
ONE HANDED USE



GORDON  
ELLIS  
& CO



1.

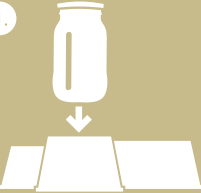

Place bottle or jar inside one of the openings to hold in place

2.



Use closest sized opener cone on lid for extra grip while opening

3.



Push down and twist lid to open



**EN** Ensure stability before each use. Take care if knocked. Any serious accident occurring through use should be reported to the manufacturer

**FR** Assurer la stabilité avant chaque utilisation. Faites attention si l'appareil est heurté. Tout accident grave survenant pendant l'utilisation doit être signalé au EC REP.

**DE** Sorgen Sie vor jedem Gebrauch für Stabilität. Seien Sie vorsichtig, wenn das Gerät getroffen wird. Jeder schwere unfall während des gebrauchs muss EC REP gemeldet werden.

## HOLDS JARS STEADY

The Spill-Not is designed to aid those with limited grip or the use of one hand to open jars and bottles. The Spill-Not helps open tightly closed lids or difficult to hold containers. It keeps all sizes of bottles and jars steady, from just 2cm up to 10cm diameter. Slip-resist grip holds each container securely. The base keeps the Spill-Not in place when using it, or use the fixing points to fit it inside a drawer for easy access. The Spill-Not has a contemporary design and is compact enough to store away easily.

**NEW** This pack includes three new opener cones. The ridges help to give a firmer grip in the hand.

! ATTACH PRODUCTION LABEL HERE !

AVAILABLE IN THE FOLLOWING LANGUAGES: EN FR DE

IFU-REF 60171/0920-3



5 016181 621304